


CARDIOFIT

ECG de Repouso
Teste Ergométrico


A batida do coração
medida em
bytes por minuto

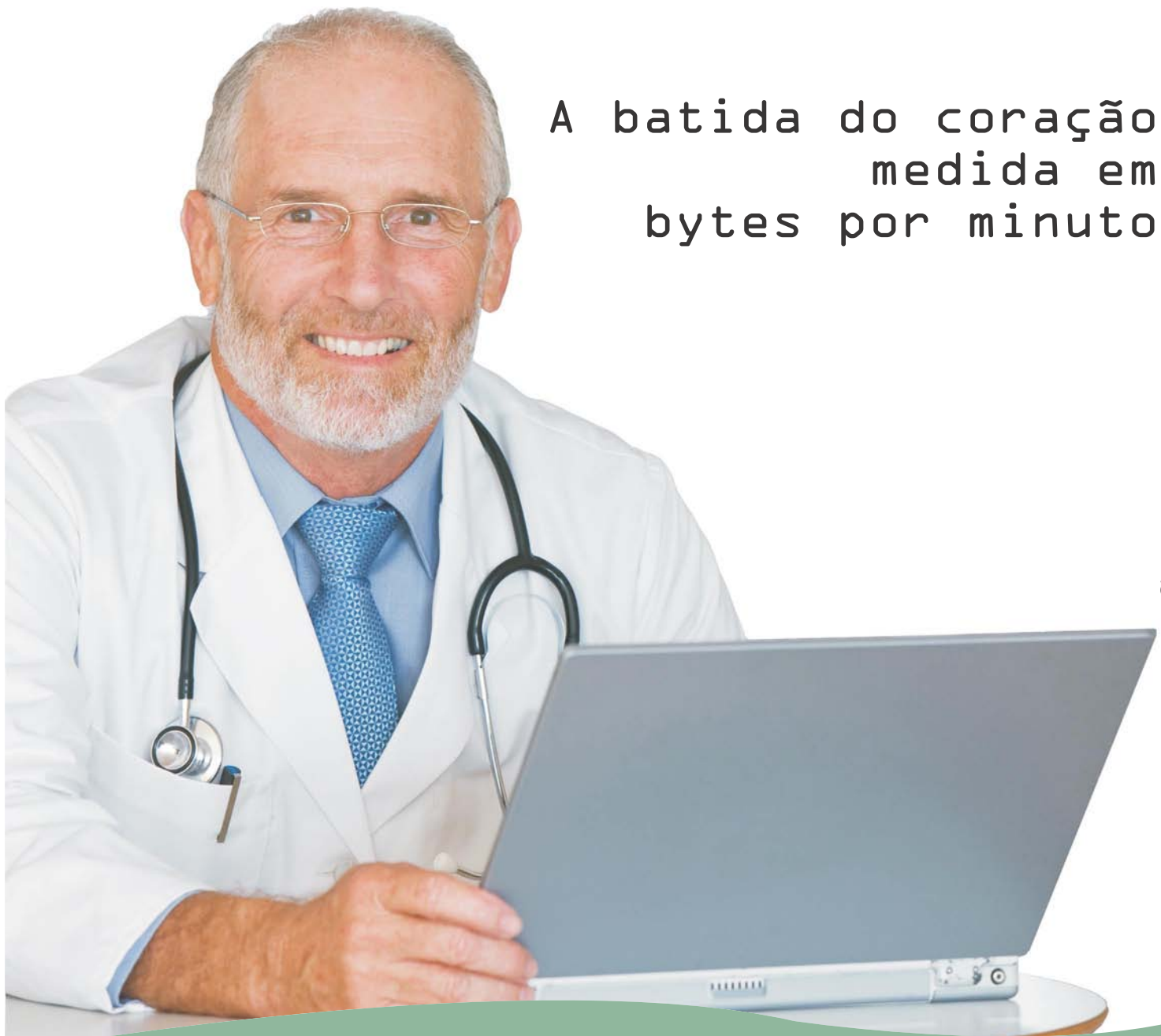

CARDIOFIT

Sistema de ECG e Teste Ergométrico Digital
com transmissão automática de exames e laudos pela Internet.

VISÃO GERAL

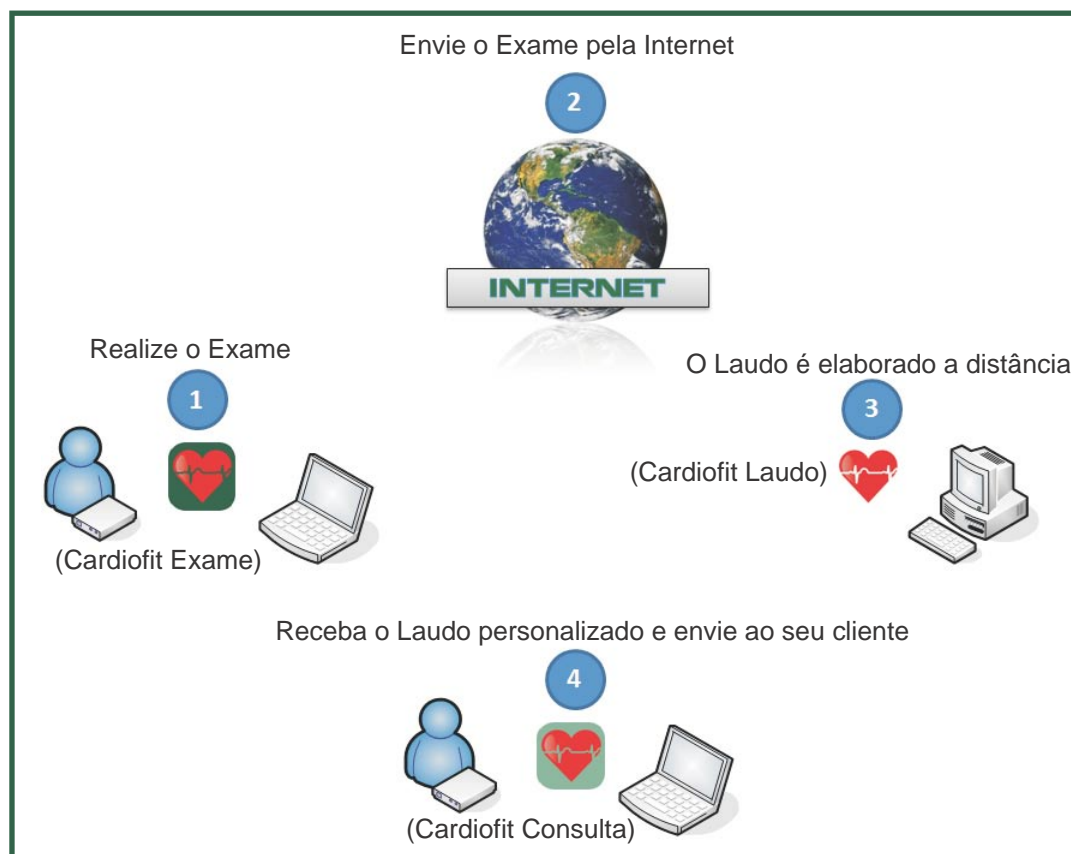

CONFIGURAÇÕES

INTERNET

O Sistema pode ser instalado em qualquer computador conectado a Internet. Nesta configuração você pode utilizar um servidor próprio ou da Ventrix Tecnologia. Os laudos são elaborados pelo seu médico e/ou pela Central Veterinária Ventrix.

INTRANET

O Sistema é instalado em qualquer computador conectado a rede interna. Nesta configuração, você necessita de um servidor. Os laudos são elaborados exclusivamente por seus médicos veterinários.

LOCAL

O Sistema é instalado em um único computador. Nesta configuração, os laudos também são elaborados exclusivamente por seus médicos veterinários.

CARDIOFIT

HARDWARE



Eletrocardiógrafo Cardiofit Vx-101


Fonte de alimentação

Cabo de ECG

Cabo serial

Eletrodo de sucção

- Mobilidade e Portabilidade
- Conexão via USB ou porta serial
- Fonte de alimentação automática (110V/220V)
- Proteção contra efeitos de desfibrilação
- Equipamento Tipo CF - Aplicação Cardíaca Direta
- Certificação INMETRO - Atende às Normas Nacionais e Internacionais de Segurança de equipamentos eletromédicos
- Imune à interferências Eletromagnéticas
- Registro Anvisa/MS nº102321000026

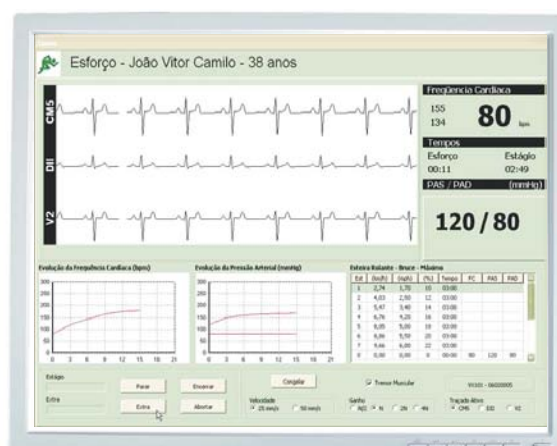

(11) 4614-6072

www.ventrix.com.br - comercial@ventrix.com.br

VENTRIX
Health Innovation

CARDIOFIT



SOFTWARE CARDIOFIT EXAME

Realização do exame de ECG de
Repouso e Teste Ergométrico

- Cadastro de operadores
- Cadastro dos pacientes
- Cadastro de Protocolos (Teste Ergométrico)
- Registro de medicamentos
- Ajuste de FC Máx/Submáx - Betabloqueadores
- Registro de dados clínicos, anamnese familiar e pessoal
- Ajustes de ganho e velocidade do traçado
- Filtro de tremor muscular
- Funções de congelamento e de repetição da captura dos sinais
- Personalização de laudos - Inclusão de banner no laudo digital
- Ferramenta back-up
- Relatórios
- Senhas de acesso
- Manual de Instruções

Fácil realização de exames em qualquer local
Utilize a Internet apenas para enviar o exame

SOFTWARE CARDIOFIT CONSULTA

Consulta, download e envio de laudos

- Consulta
- Download
- Envio automático de laudos por e-mail personalizado ao cliente
- Senhas de acesso
- Manual de Instruções

Acesso aos laudos em qualquer computador
No local do exame, na recepção da clínica, ou em qualquer lugar do planeta



CARDIOFIT



SOFTWARE CARDIOFIT LAUDO

Elaboração do laudo por médicos do cliente ou da Central Médica Ventrix.

- Laudo em qualquer local com acesso à Internet
- Laudos padrão
- Réguas de cálculo (Intervalos RR, PR, QRS e QT, Segmento ST, Ângulos P, QRS e T)
- Indicador gráfico cardiovascular
- Cadastramento de Médico Master - supervisão dos laudos
- Laudos elaborados pela Central Médica Ventrix em até 4 horas para ECG de Repouso e 48 horas para Teste Ergométrico (dias úteis/horário comercial)
- Segunda Opinião - Central Médica Ventrix
- Relatórios
- Senhas de acesso

Elaboração de laudos em qualquer computador
No local do exame ou em qualquer lugar do planeta

SOFTWARE CARDIOFIT ADMIN

Gerenciamento do Sistema

- Cadastro de clientes, médicos e administradores
- Cadastro de acessos
- Cadastro de equipamentos
- Cadastro de protocolos e medicamentos
- Ferramenta back-up
- Relatórios
- Senhas de acesso
- Manual de Instruções

Gerenciamento e controle de todo o sistema



CARDIOFIT

INOVAÇÕES

- Solução completa para ECG de Repouso e Teste Ergométrico
- Único Sistema totalmente digital desenvolvido em plataforma WEB
- Laudos elaborados a distância
- Laudos elaborados por médicos do cliente e/ou pela Central Médica Ventrix
- Segunda Opinião - Central Médica Ventrix
- Realiza exames sem necessitar estar conectado à Internet
- Comunicação automática entre os módulos
- Amigável e fácil de usar
- Emissão de relatórios de utilização e estatísticas
- Atualização do Software via Internet
- Compatível com Windows XP e Windows Vista
- Respeito ao meio ambiente - Não necessita de papel para realização e envio de exames e laudos
- Flexibilidade para aquisição - Compre ou Alugue - Com ou Sem laudo




CARDIOFIT

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Empresas que respeitam o meio ambiente,
respeitam também o ser humano
e contribuem para uma vida saudável.

Por isso, as empresas de Saúde
devem tomar atitudes a favor do meio ambiente,
como consumir menos papel.

O Cardiofit, por ser totalmente digital,
dispensa a necessidade do uso de papel ou tinta.
Seguindo as tendências atuais, não só tecnológicas,
mas também de sustentabilidade.

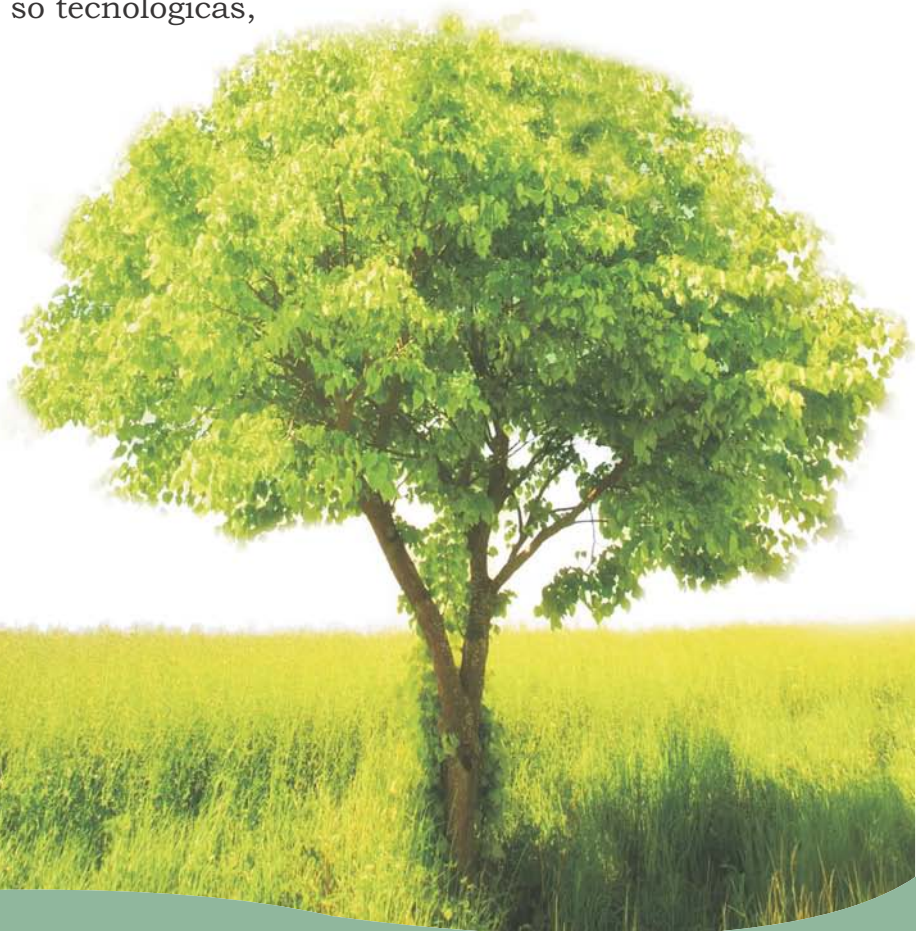

CARDIOFIT

00100 11111
111111000110111
A batida do coração
medida em
bytes por minuto

10011001000
11111110
100

GARANTIAS

- Atualização do Software via Internet
- Garantia de 1 ano ao eletrocardiógrafo
- Garantia de 3 meses aos acessórios
- Assistência Técnica

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PARA O USO DO SISTEMA

- 512 MB de memória RAM para Windows XP;
- 1GB de memória RAM para Windows Vista;
- 4GB Windows 7 (32 Bits);
- Resolução mínima de tela 1024 x 768 pixels;
- Acesso a Internet Banda-Larga.

Oferecemos treinamento e
suporte operacional
gratuito a distância
Via SKYPE.



**Consulte
condições comerciais**

VENTRIX Tecnologia

Av. Antonio Mathias de Camargo,
736 - 1o. Andar - Centro
CEP: 06700-158 - Cotia - SP

(11) 4614-6072

www.ventrix.com.br - comercial@ventrix.com.br

VENTRIX
Health Innovation

